

SISTEMA OCCIPITOCERVICAL

VIA POSTERIOR



Versátil e adequado para resultados efetivos em cirurgias da coluna cervical.

O Sistema Occipitocervical é ideal para casos de fixação da coluna cervical, inclusive com o occipital. Um grande avanço para o seu trabalho através de um sistema completo.


Destaca-se em sua composição por parafusos monoaxiais e poliaxiais que trazem uma fixação mais estável à coluna cervical, atingindo as primeiras vértebras torácicas. Realize uma implantação rápida e segura garantida pela mobilidade dos parafusos poliaxiais.



ÓSSEA
MEDICAL TECHNOLOGY

INDICAÇÕES

- Traumas.
- Patologias ou compressão neural cervical.
- Falta de estabilidade na coluna cervical.
- Fixação do occipital na coluna cervical (tetraplegia).

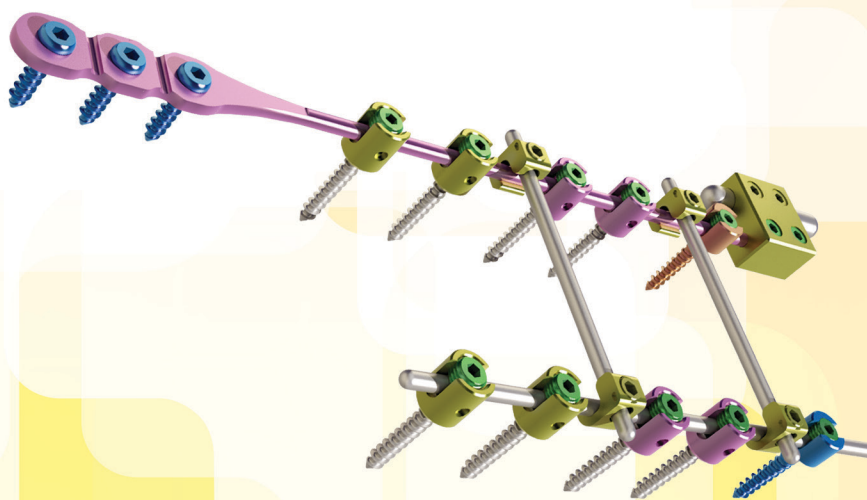

D4/14

SISTEMA OCCIPITOCERVICAL

HASTES TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS

	Comprimento (mm)			
Ø 3,18 mm	100	180	240	300

PARAFUSO ESPONJOSO PARA PLACA OCCIPITOCERVICAL

	Comprimento (mm)				
Ø 3,5 mm	6	8	10	12	14

PARAFUSOS MONOAXIAIS

	Comprimento (mm)												
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	30	36	40
Ø 3,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 4,0 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PARAFUSOS POLIAXIAIS

	Comprimento (mm)												
	10	12	14	16	18	20	22	24	26	30	36	40	45
Ø 3,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 4,0 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

VERSATILIDADE

Com parafusos monoaxiais e poliaxiais, fixa a coluna cervical desde os primeiros níveis até as primeiras vértebras torácicas.

MOBILIDADE

Implantação rápida e segura nas massas laterais garantida pela mobilidade dos parafusos poliaxiais.

FIXAÇÃO

Placas occipitocervicais de 3 ou 4 furos são fixadas com parafusos esponjosos e prolongam a fixação da coluna ao crânio. Conectores distais dão prolongamento horizontal à haste, aumentando as possibilidades de fixação.

SEGURANÇA

Sistema de tração transversal com haste, ganchos e bloqueadores proporciona maior segurança.

ADAPTAÇÃO

Variedade de tamanhos para todos os componentes, com implantes adequados para as necessidades e anatomia de cada paciente.

INSTRUMENTAL

Kit completo e eficaz para um procedimento cirúrgico rápido e seguro.



Financiamento pelo BNDES

Com a Óssea você pode adquirir seu produto através do BNDES.

Entre em contato pelo telefone (19) 3246.2622 e saiba mais.

BPF
Boas Práticas
de Fabricação



Liga de titânio compatível com ressonância magnética. Matéria-prima importada com os melhores fabricantes internacionais. Testes constantes de contaminação superficial por elementos dos processos de fabricação através do microscópio eletrônico de varredura (MEV Stereoscan 440 Leica).

ÓSSEA
MEDICAL TECHNOLOGY
www.ossea.com.br
+55 19 3246.2622