

Hema Drain

Drenagem
Cirúrgica
Externa



HemaDrain

Drenagem Cirúrgica Externa

Sistema de Drenagem Cirúrgica Externa em silicone, de circuito fechado para o meio externo, com válvula antirrefluxo no cateter de drenagem.

É fabricado nos modelos **HemaDrain-R**, com reservatório para sucção em silicone, e **HemaDrain-B**, com bolsa coletora para drenagem por gravidade.

Especialmente indicado em neurocirurgia para a prevenção do pneumoencéfalo pós-operatório nos hematomas subdurais, agudos ou crônicos.



Introdutor curvado

Em aço inox com ponta cuidadosamente afiada e diâmetro ideal para a tunelização do dreno

Dreno de silicone

Cateter redondo multiperfurado com linha radiopaca. Permite tanto a lavagem do hematoma como a sua posterior drenagem

Porta de acesso

Para a retirada do ar remanescente no sítio de drenagem e para a lavagem do sistema, no caso de obstrução da tubagem por coágulo, sem a necessidade de agulha

Válvula antirrefluxo

Para prevenção de pneumoencéfalo e infecções causadas por refluxo do líquido drenado

Reservatório em silicone

Com 200 ou 100 ml, ideal para drenagem por sucção. Especialmente indicado para coleções subdurais como os hematomas, higromas e empiemas

Porta coletora

Para esvaziamento da bolsa sem a necessidade de utilização de agulha, prevenindo vazamentos e contaminações


Bolsa coletora

Com 700 ml, ideal para drenagem por gravidade. Especialmente indicada para coleções subdurais como os hematomas, higromas ou empiemas




Drenagem Cirúrgica Externa HemaDrain-R

Modelo	Reservatório	Largura do dreno	Comprimento do dreno
HR1C12FR	100ml	12 FR	450mm
HR2C12FR	200ml	12 FR	450mm

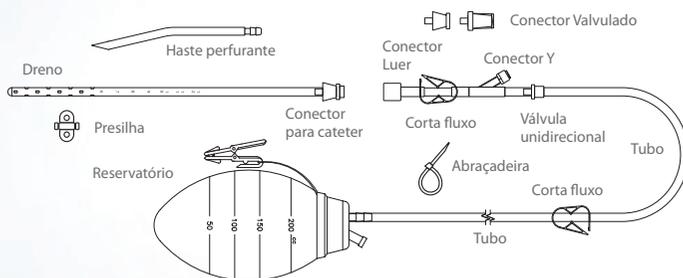

Drenagem Cirúrgica Externa HemaDrain-B

Modelo	Reservatório	Largura do dreno	Comprimento do dreno
HB7C12FR	700ml	11 FR	450mm

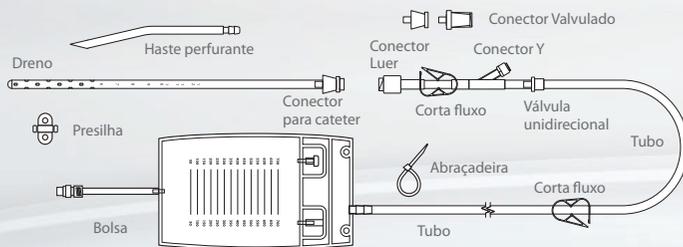

As informações técnicas deste produto não se limitam às características apresentadas neste catálogo. Para informações completas, solicite as instruções de uso para info@hpbio.com.br